

Uputstvo za upotrebu

Ovlašćeni predstavnik: Dental Express d.o.o.,
Uroša Martinovića 21/L2, Novi Beograd,
office@dentalexpress.rs

Proizvođač: Myofunctional Research CO.,
Australia

Broj resenja: 515-02-01071-2021-7

Trainer for braces II Class T4B2 – uložak za korekciju zagriza preko bravica

Miofunkcionalni aparat za decu sa fiksnim ortodontskim aparatom u II klasi.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovo medicinsko sredstvo je isključivo za profesionalnu upotrebu i ne može se koristiti bez nadzora doktora stomatologije ili specijaliste ortopedije vilica. Neophodno je da pažljivo koristite medicinsko sredstvo.

Aparat je namenjen za jednog pacijenta. Upotreba aparata na drugom pacijentu ne dovodi do željenih rezultata.

Čuvati na sobnoj temperaturi.

Pakovanje: 1 aparat pakovan u kutiji.

U ovom uputstvu pročit ćete:

1. Šta je miofunkcionalni aparat i čemu je namenjen?
2. Karakteristike aparata?
3. Kako se upotrebljava?
4. Procedura postavljanja aparata u ustima
5. Moguće neželjene reakcije
6. Kombinacija sa ostalim aparatima
7. Koji je cilj tretmana
8. Čišćenje i čuvanje miofunkcionalnog aparata
9. Ostale informacije

Šta je miofunkcionalni aparat i čemu je namenjen?

Miofunkcionalni aparat je sistem specijalno dizajniran za korekciju loših oralnih navika i istovremeno ispravlja probleme u razvitku gornje i donje vilice, kao i pravilnom položaju zuba.

Karakteristike T4B2 aparata

- Ispravan položaj vilica.
- Kombinacija prevencije guranja

jezika, infantilnog gutanja i disanja na usta pomaže u korekciji II klase.

- T4B2 smanjuje probleme u temporomandibularnom zglobovima
- Udubljena napravljena zbog bravica i lukova na treneru omogućavaju dobru zaštitu sluzokože u fazi nošenja fiksnog aparata
- Jezičak na treneru za korekciju položaja vrha jezika

Kako se upotrebljava?

Koristiti trener T4B2 koristiti 1-2h preko dana i preko noći.

Koristite T4B2 dok učite, čitate, gledate TV ili dok radite. Najbolje je krenuti sa T4B2 odmah kada se postave bravice. T4B2 će na taj način omogućiti lakše privikavanje na fiksne aparate.

- T4B2 se može koristiti i pre ortodontskog tretmana sa ciljem da poboljša razvitak vilica i smanji potrebu za kompleksnim tretmanima.
- T4B2 se može koristiti kada se pacijentu postavi gornji fiksni aparat i nošenjem trenera se omogućava usklađivanje položaja vilica i u nekim slučajevima nije potrebno postaviti donjih fiksnih aparat. T4B2 se može koristiti i u kombinaciji sa drugim ortodontskim aparatima.
- T4B2 može ispasti tokom noći u početku. Nastaviti sa upotrebom trenera. Ukoliko noćno nošenje nije moguće, povećajte nošenje u toku dana.
- Nositi trener svaki dan i truditi se da to postane rutina. Koristiti po uputstvu koje daje doktor specijalista ortodontije.
- Truditi se da su usne spojene kada se trener nalazi u ustima
- Pozicija vrha jezika treba da se nalazi na jezičku

Procedura postavljanja aparata u ustima pacijenta:

- Step 1. Držite trener tako da je graničnik za jezik postavljen nagore
- Step 2. Postavite trener u usta
- Step 3. Držite položaj jezika tako da se jezik dodiruje svojom

gornjom stranom i vrhom graničnik za jezik.

- Step 4. Zatvorite usne i dišite kroz nos

Moguće neželjene reakcije

Zubi mogu postati u početku tretmana osetljiviji, to je potpuno normalno, ali ako osetljivost i bol perzistira obratite se Vašem stomatologu, ortodontu.

Kombinacija sa ostalim aparatima

T4B2 se koristi pre i u toku nošenja fiksnog aparata kao pomoć u korekciji pozicije vilica

Cilj tretmana:

- Usne su sastavljene, sem tokom govora i jela
- Disanje je na nos što omogućava pravilni razvitak gornje i donje vilice i pravilan preklap zuba
- Nema aktivnosti usana prilikom gutanja, što omogućava prednji razvoj zuba da se normalno razvijaju
- Poboljšan raspored zuba u vilici
- Poboljšan razvitak lica

Dužina trajanja tretmana je individualna. Trejner se mora nositi i danju.

Posete Vašem stomatologu ili ortodontu su obavezne za uspešan tretman.


Čišćenje: Čistiti tekućom toplom vodom svaki put kada aparat izvadite iz usta. Koristiti Myoclean tablete da temeljno očistite aparat dva puta nedeljno. Pitajte Vašeg doktora za Myoclean, preporučeno sredstvo za čišćenje svih MRC aparata. Aparat čuvati na sobnoj temperaturi.

Ostale informacije

Opres. Ne grizite Myobraces!!!

Opres. Može se desiti da Myobraces aparat ispadne tokom noći u početku terapije, ukoliko se to dogodi povećajte nošenje aparata u toku dana.

OPREZ: KORISTITI APARAT SAMO POD NADZOROM LICENCIJANOG ORTODONTA ILI DOKTORA

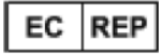

European Representative: Myofunctional Research Europe B.V, Gompensstraat 21C 5145 RM Waalwijk, Netherlands, P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk, Netherlands

